

Notre gamme de gants & doigtiers

STÉRILES - NON STÉRILES - DE TRAVAIL

Septembre 2025



L'INGÉNIERIE DES PROCÉDÉS
PROPRES & STÉRILES



Une société du groupe

SYNEXIN
SYNERGIE DE NOS EXPERTISES POUR
L'INGÉNIERIE DE VOS PROCESS

SOMMAIRE

> DÉCOUVREZ STERIGENE.....	p.3
> INTRODUCTION.....	p.6
> GANTS STÉRILES	
Normes & produits.....	p.13
Cleanroom nitrile.....	p.14
Cleanroom latex.....	p.15
Chirurgicaux latex.....	p.16
Chirurgicaux polyisoprène.....	p.17
> GANTS NON STÉRILES	
Normes & produits.....	p.19
Cleanroom nitrile.....	p.20
Cleanroom latex.....	p.22
Industriels nitrile.....	p.23
Industriels latex.....	p.28
Industriels vinyle.....	p.29
> GANTS DE TRAVAIL	
Normes & produits.....	p.31
Lycra.....	p.32
Coton.....	p.33
Silicone.....	p.33
> DOIGTIERS	
Normes & produits.....	p.35
Latex.....	p.36
> ANNEXES.....	p.39

LE GROUPE SYNEXIN

STERIGENE est une société du groupe SYNEXIN qui offre des **solutions 360° pour vos projets clés en main en environnements propres et stériles**.

Le groupe SYNEXIN regroupe plusieurs entités, toutes spécialisées dans différents métiers liés aux environnements critiques :



Expertise en ingénierie des
procédés propres & stériles



Expertise aéraulique pour
environnements critiques



Expertise en conception &
agencement d'environnements critiques

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.SYNEXIN.fr

LES EXPERTISES STERIGENE

STERIGENE, l'**ingénierie des procédés propres et stériles**, a été créée en 1986 et a su évoluer en fonction des nombreuses normes et nombreux référentiels des secteurs d'activités industrielles de la pharmacie, des biotechnologies, de la chimie, des dispositifs médicaux, de l'agroalimentaire, de la microélectronique...

Pour répondre aux besoins diversifiés sur le marché des salles propres et des environnements contrôlés, STERIGENE dispose d'une **capacité d'interventions multiples tout au long des projets clients** :



ÉQUIPEMENTS PROCESS

Concevoir et réaliser
vos lignes de production
avec des équipements
de qualité



PRESTATIONS TECHNIQUES

Assurer les prestations de
suivi technique de vos
équipements



REVAMPING

Assurer les prestations
d'automatisme et les
mises à niveau de vos
équipements



CONSOMMABLES & ÉQUIPEMENTS

Fournir des solutions
pour la maîtrise de la
contamination



AUDITS & FORMATIONS

Former vos opérateurs
pour maîtriser vos
process et les risques de
contamination

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.STERIGENE.com

CONSOMMABLES & ÉQUIPEMENTS

STERIGENE propose une offre complète de consommables & d'équipements pour salles propres :



ÉQUIPEMENTS POUR LA PERSONNE

Coiffants, lunettes, masques, combinaisons, manchettes, blouses, gants & doigts, surchausses, chaussures & sabots



EMBALLAGES ULTRAPROPRES

Gaines et sachets, charlottes



SOLUTIONS DE NETTOYAGE & DÉSINFECTION

Éthanol & IPA, biocides & sporicides, détergents



CONSOMMABLES & MATÉRIEL DE NETTOYAGE

Tissus, housses mop, balais, chariots, tapis



PETITS ÉQUIPEMENTS

Aspirateurs, thermosoudeuses, balances, distributeurs, assises, papeterie & écriture



MOBILIER DE SAS

Standard, modulaire ou sur-mesure en différents matériaux



Retrouvez tous nos consommables & nos équipements de la personne et faites vos **demandes de devis** en 2 clics sur notre boutique en ligne : www.STERIGENE-STORE.com

LA MARQUE CLEANVIEW

Forte de son expérience dans la **maîtrise de la contamination**, STERIGENE a sélectionné avec soin des partenaires fabricants, qualifiés pour leur expertise métier, et a développé sa **marque propre** : CleanView®.



> QU'EST-CE QUE CLEANVIEW® ?

C'est **plusieurs gammes de produits** facilement identifiables, de **qualité**, et **qualifiés pour salles propres** selon les normes en vigueur et selon vos besoins : choix des matériaux, rentabilité et qualité.

> POURQUOI UNE MARQUE PROPRE ?

Pour élargir l'offre STERIGENE avec une plus **grande réactivité** afin de **s'adapter au mieux à vos besoins spécifiques** tout en proposant des produits à un **tarif intéressant**.



INTRODUCTION



L'HABILLAGE, CE QU'IL FAUT SAVOIR

L'impact des contaminants est dépendant du produit fabriqué.

Chaque type d'industrie porte son attention sur un ou plusieurs types de contaminations : **particulaire, ionique, microbiologique, chimique et les résidus non-volatiles.**

Pour maintenir les requis de propreté en environnements contrôlés, les contaminants et leurs vecteurs de contamination doivent être éliminés ou minimisés. L'habillement est l'une des barrières à prendre en compte pour limiter ces contaminations. Il est également un moyen de protéger les opérateurs lors de manipulations de produits chimiques ou biologiques.

De ce fait, plusieurs spécifications doivent définir votre besoin utilisateur :

- **Le type d'intervention et l'environnement** => Opérateurs, maintenance, visiteurs, salle propre (classes ISO ou classes GMP EU..)
- **Le matériau et les coutures du vêtement** => Confort de l'opérateur, résistance aux mouvements, pertes particulières
- **Le niveau de protection** => chimique, biologique, radioactivité, antistatique, ...

En fonction de votre secteur d'activité et du classement de vos zac, STERIGENE vous propose ce catalogue pour vous aider à faire le choix le plus adapté.

Secteurs d'activités	Pharmaceutique stérile <i>En accord avec évolutions Annexe 1 des GMP EU</i>		DM, Cosmétique		Microélectronique, Spatial, Optique, Aéronautique				Agroalimentaire	
Classification de propreté	A/B	C	A/B	C/D	ISO 5	ISO 6	ISO 7	ISO 8	ISO 5	ISO 7
Charlotte	-	-								
Cagoule										
Lunettes		-								
Masque										
Combinaison										
Blouse	-	-	-		-				-	
Sous-vêtements		-						-		-
Gants										
Chaussants										

Exigence réglementaire stérile
 Exigence réglementaire
 Préconisé
 Application spécifique

Source: Tiré du Livre blanc de l'ASPEC (édition 2021)

ZOOM PHARMACEUTIQUE STÉRILE : ANNEXE 1 DES GMP EU

Une description des **vêtements requis en pharmaceutique stérile**, et pour chaque classe de propreté, est indiquée avec précision et détails dans l'annexe 1 des GMP EU. Le texte a fortement évolué et les requis réglementaires sont à mettre en application depuis août 2023.




Pensez à qualifier votre habillement et à l'inscrire dans votre stratégie de contrôle de la contamination :

- Évaluation du relargage particulière des vêtements (body box vs. Tambour de Helmke)
- Vérification de la garantie de stérilité (validation selon ISO 11137)
- Vérification du système d'emballage (sous vide avec ouverture facile pour ouverture aseptique)
- Vérification du système de pliage (maintenir la stérilité lors de l'habillement et faciliter l'enfilage)

LES GANTS STÉRILES & NON STÉRILES

Dans un premier temps, il est important de notifier que l'ensemble **des gants stériles et non stériles** présentés dans ce catalogue sont **non-poudrés**.

Ces gants stériles et non stériles répondent soit au règlement (UE) 2016/425 relatif aux **Équipements de Protection Individuelle** (EPI), soit au règlement (UE) 2017/745 relatif aux **Dispositifs Médicaux** (DM), soit aux deux en même temps.

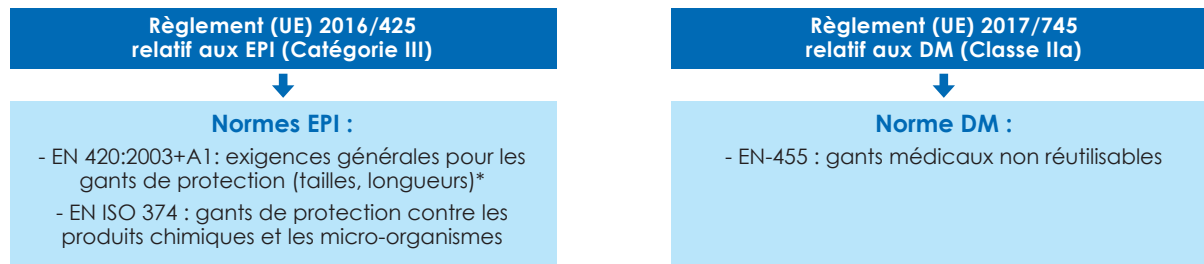

** Voir en annexes pour la description de cette norme*

Les équipements de protection individuelle (EPI)

Pour les EPI, la norme EN ISO 374 se divise en 5 parties.

La première partie (EN ISO 374-1) définit les exigences de performance chimique des gants et les classes en trois types :

- **Type A** : 6 produits chimiques testés avec un temps de perméation minimum ≥ 30 min
- **Type B** : 3 produits chimiques testés avec un temps de perméation minimum ≥ 30 min
- **Type C** : 1 produit chimique testé avec un temps de perméation minimum ≥ 10 min

Vous trouverez ci-après la liste des produits chimiques (méthode de test selon l'EN 16523-1).

LES GANTS STÉRILES & NON STÉRILES

Lettre	Produits chimiques	CAS	Classification
A	Méthanol	67-56-1	Alcool primaire
B	Acétone	67-64-1	Cétone
C	Acétonitrile	75-05-8	Composé nitrile
D	Dichlorométhane	75-09-2	Hydrocarbure chloré
E	Disulfure de carbone	75-15-0	Composé organosulfuré
F	Toluène	108-88-3	Hydrocarbure aromatique
G	Diéthylamine	109-89-7	Amine
H	Tétrahydrofurane	109-99-9	Composé étherique hétérocyclique
I	Acétate d'éthyle	141-78-6	Ester
J	n-Heptane	142-82-5	Hydrocarbure saturé
K	Hydroxyde de sodium 40 %	1310-73-2	Base inorganique
L	Acide sulfurique 96 %	7664-93-9	Acide inorganique
M	Acide nitrique 65 %	7697-37-2	Acide minéral inorganique
N	Acide acétique 99 %	64-19-7	Acide organique
O	Ammoniac 25 %	1336-21-6	Base organique
P	Peroxyde d'hydrogène 30 %	7722-84-1	Peroxyde
S	Acide fluorhydrique 40 %	7664-39-3	Acide minéral inorganique
T	Formaldéhyde 37 %	50-00-0	Aldéhyde

LES GANTS STÉRILES & NON STÉRILES

De ce fait, un gant répondant à cette norme, porte le logo suivant (par exemple) :

EN ISO 374-1/2016/TYPE A



JKLMNO

EN ISO 374-1/2016/TYPE B



JKL

EN ISO 374-1/2016/TYPE C



J

L'**EN 374-2** définit la résistance du gant face à la pénétration. On y retrouve la notion d'**AQL** (Acceptable Quality Level). Il s'agit d'une méthode statistique d'échantillonnage pour déterminer la qualité d'un produit. Plus la valeur AQL est basse, plus la qualité du produit est élevée. Une valeur AQL de 0,65 est donc meilleure qu'une valeur de 1,0.

L'**EN ISO 374-5** donne les exigences de performance pour les risques contre les micro-organismes. Si la mention « VIRUS » est apposée sous le logo, cela signifie qu'en plus des tests réalisés selon la norme EN 374-2, des tests ont été faits selon la norme ISO 16604.



VIRUS

Les dispositifs médicaux (DM)

La norme des gants marqués dispositifs médicaux reprend certains critères qu'on retrouve chez les EPI :

- **EN 455-1+A1** : contrôle statistique d'étanchéité – AQL 1.5
- **EN 455-2 :2015** : définition des caractéristiques du gant (taille, longueur...)
 - o Les tailles sont exprimées de XS à XL
 - o La longueur du gant doit être de minimum 24 cm, quelque soit la taille
- **EN 455-3 :2015** : évaluation biologique du nombre de protéines dans les gants en latex

LES GANTS DE TRAVAIL & LES DOIGTIERS

Nos **gants de travail** sont là pour résoudre vos problématiques telles que la **chaleur**, les **surfaces trop sensibles** et bien d'autres. Composés de lycra, de coton ou de silicone, ils vous aideront dans les manutentions spécifiques que vous avez à réaliser.

Nos **doigtiers** eux, sont présents pour vos **opérations de minutie**. Ils peuvent posséder des propriétés antistatiques (capacité à dissiper les charges). Un matériau dissipatif a la capacité de ne pas accumuler de charges électrostatiques : il dissipe les charges.

Nos doigtiers se différencient par le **modèle HBM** (Human Body Model). Il est utilisé par les industriels comme test de référence. Il permet de simuler la décharge d'un individu debout, dans un circuit intégré qu'il toucherait du doigt. Le circuit électronique permettant de simuler une décharge de type HBM comprend une capacité de 100pF et une résistance de 1500 Ohms supposés modéliser le corps humain.

On retrouve alors plusieurs classes :

Classe ESD*	Volts
Classe 0	< 250
Classe 1	1 250 à 1 999
Classe 2	2 000 à 3 999
Classe 3	4 000 à 7 999



* ESD : ElectroStatic Discharge = Décharge électrostatique

GANTS STÉRILES



NORMES & PRODUITS

			Annexe 1 GMP Compliant	Stérile	CE EPI CATEGORIE III				CE DM Classe IIa	Particules (EST-RP-CC005) Par cm² ≥ 0,5 µm	Épaisseur (mm)			Dimension (cm)
		ISO 374-1 : 2016			A374-2 AQL	ISO 374-5 Bactéries, fonges & Virus	EN455-1 AQL	Majeur	Paume		Poignet			
Gants stériles	Matériaux	Produits										Type	Testé sur	
Cleanroom	Nitrile	BONAGL400S			B	JKT	≤ 1,5	●		< 1 200	0,18	0,12	0,09	40,0
		KIM1182S			C	K	≤ 1,5	●		< 1 200	0,10	0,08	0,07	30,5
		KIM568S			B	KPT	≤ 1,5	●		< 950	0,16	0,13	0,10	30,5
	Latex	KIM5684S			C	K	≤ 1,5	●		< 1 500	0,22	0,20	0,14	30,5
Chirurgicaux	Latex	SPTSUPLUS			C	ML		●	≤ 0,65			0,21		28,0
		SPTSUP			C	ML		●	≤ 0,65			0,21		28,0
		SPTDERMAPF			C	ML		●	≤ 1,0					27,0
	Polyisoprène	SPTSYN			C	LM		●	≤ 0,65			0,21		28,0

CLEANROOM NITRILE

> CLEANVIEW® 16" BLANCS



EN ISO 374-1/2016/TYPE B



JKT



VIRUS



- Manchettes roulées
- Mains gauche et droite distinctes
- Doigts texturés
- Utilisables en double gantages
- Haut niveau de propreté
- Particules par $\text{cm}^2 \geq 0,5 \mu\text{m}$: < 1200 (IEST-RP-CC005)
- AQL $\leq 1,5$ (EN374-2)
- Niveau de stérilité garanti (SAL) 10^{-6}
- Certifiés EPI Cat. III selon le Règlement (UE) 2016/425

	Majeur	Paume	Poignet
Épaisseur (mm)	0,18	0,12	0,09

Référence	BONAGL400S
Tailles disponibles	6 à 10
Emballage	Emballage individuel par paire, double emballage par 10 paires
Conditionnement	200 paires par carton

> KIMTECH™ G3 STERLING™ 12" ARGENTÉS



EN ISO 374-1/2016/TYPE C



K



VIRUS



- Manchettes roulées
- Mains gauche et droite distinctes
- Doigts texturés
- Utilisables en double gantage
- Conditionnés en ISO 3
- Particules par $\text{cm}^2 \geq 0,5 \mu\text{m}$: 1200 (IEST-RP-CC005)
- AQL $\leq 1,5$ (EN374-2)
- Niveau de stérilité garanti (SAL) 10^{-6}
- Certifiés EPI Cat. III selon le Règlement (UE) 2016/425

	Majeur	Paume	Poignet
Épaisseur (mm)	0,10	0,08	0,07

Référence	KIM1182S
Tailles disponibles	6 à 10
Emballage	Emballage individuel par paire, double emballage par 30 paires
Conditionnement	300 paires par carton

CLEANROOM NITRILE

> KIMTECH™ G3 12" BLANCS



EN ISO 374-1/2016/TYPE B



KPT



VIRUS

Ansell



- Manchettes roulées
- Mains gauche et droite distinctes
- Doigts texturés
- Utilisables en double gantage
- Haut niveau de propreté
- Particules par $\text{cm}^2 \geq 0,5 \mu\text{m}$: 950 (IEST-RP-CC005)
- $\text{AQL} \leq 1,5$ (EN374-2)
- Niveau de stérilité garanti (SAL) 10^{-6}
- Certifiés EPI Cat. III selon le Règlement (UE) 2016/425

	Majeur	Paume	Poignet
Épaisseur (mm)	0,16	0,13	0,10

Référence 	KIM568S		
Tailles disponibles	6 à 10		
Emballage	Emballage individuel par paire, double emballage par 20 paires		
Conditionnement	200 paires par carton		

CLEANROOM LATEX

> KIMTECH™ G3 12" BLANCS



EN ISO 374-1/2016/TYPE C



K



VIRUS

Ansell



- Manchettes roulées
- Mains gauche et droite distinctes
- Doigts texturés
- Utilisables en double gantage
- Particules par $\text{cm}^2 \geq 0,5 \mu\text{m}$: < 1500 (IEST-RP-CC005)
- $\text{AQL} \leq 1,5$ (EN 374-2)
- Niveau de stérilité garanti (SAL) 10^{-6}
- Certifiés EPI Cat. III selon le Règlement (UE) 2016/425

	Majeur	Paume	Poignet
Épaisseur (mm)	0,22	0,20	0,14

Référence 	KIM5684S		
Tailles disponibles	5,5 à 9		
Emballage	Emballage individuel par paire, double emballé par 20		
Conditionnement	200 paires par carton		

CHIRURGICAUX LATEX

> SUPREME PLUS 11" BLANCS



EN ISO 374-1/2016/TYPE C



ML



VIRUS

- Manchettes roulées
- Mains gauche et droite distinctes
- Doigts texturés
- Utilisables en double gantage
- AQL $\leq 0,65$ (EN 455-1)
- Niveau de stérilité garanti (SAL) 10^{-6}
- Certifiés EPI Cat. III selon le Règlement (UE) 2016/425
- Certifiés DM Classe IIa selon le Règlement (UE) 2017/745

	Majeur	Paume	Poignet
Épaisseur (mm)		0,21	

Référence

SPTSUPPLUS

Tailles disponibles

5,5 à 9

Emballage

Emballage individuel par paire,
50 paires par boîte distributrice

Conditionnement

300 paires par carton

> SUPREME 12" BLANCS



EN ISO 374-1/2016/TYPE C



ML



VIRUS

- Manchettes roulées
- Mains gauche et droite distinctes
- Doigts texturés
- Utilisables en double gantage
- AQL $\leq 0,65$ (EN 455-1)
- Niveau de stérilité garanti (SAL) 10^{-6}
- Certifiés EPI Cat. III selon le Règlement (UE) 2016/425
- Certifiés DM Classe IIa selon le Règlement (UE) 2017/745

	Majeur	Paume	Poignet
Épaisseur (mm)		0,21	

Référence

SPTSUP

Tailles disponibles

5,5 à 9

Emballage

Emballage individuel par paire,
50 paires par boîte distributrice

Conditionnement

300 paires par carton

CHIRURGICAUX LATEX

> DERMA PF 11" BLANCS



EN ISO 374-1/2016/TYPE C



ML



VIRUS

- Manchettes roulées
- Mains gauche et droite distinctes
- Doigts texturés
- Utilisables en double gantage
- AQL ≤ 1 (EN 455-1)
- Niveau de stérilité garanti (SAL) 10^{-6}
- Certifiés EPI Cat. III selon le Règlement (UE) 2016/425
- Certifiés DM Classe IIa selon le Règlement (UE) 2017/745

CHIRURGICAUX POLYISOPRÈNE

> SYNTegra IR 12" BLANCS



EN ISO 374-1/2016/TYPE C



LM



VIRUS

- Manchettes roulées
- Mains gauche et droite distinctes
- Doigts texturés
- Utilisables en double gantage
- AQL $\leq 0,65$ (EN 455-1)
- Niveau de stérilité garanti (SAL) 10^{-6}
- Certifiés EPI Cat. III selon le Règlement (UE) 2016/425
- Certifiés DM Classe IIa selon le Règlement (UE) 2017/745

	Majeur	Paume	Poignet
Épaisseur (mm)		0,21	

Référence	SPTDERMAPF	SPTSYN
Tailles disponibles	6 à 10	6 à 10
Emballage	Emballage individuel par paire, 50 paires par boîte distributrice	Emballage individuel par paire, 50 paires par boîte distributrice
Conditionnement	300 paires par carton	300 paires par carton



GANTS NON STÉRILES



NORMES & PRODUITS

			Annexe 1 GMP Compliant	CE EPI CATEGORIE III				Contact Alimentaire	Particules (IEST-RP-CC005) Par cm² ≥ 0,5 µm	Épaisseur (mm)			Dimension (cm)
		ISO 374-1 : 2016		A374-2 AQL	ISO 374-5 Bactéries, fonges & Virus	Majeur	Paume			Poignet			
Gants non stériles	Matériaux	Produits									Type	Testé sur	
Cleanroom	Nitrile	SGNITRIPUR		C	JK	≤ 1,5	●		1 120	0,16	0,13	0,09	30,0
		KIM5688		B	KPT	≤ 1,5	●		< 950	0,16	0,13	0,10	30,5
		KIM6299		C	K	≤ 1,5	●		< 950	0,16	0,13	0,10	30,5
		BONAGL300		B	JKT	≤ 1,6	●		< 1 200	0,13	0,10	0,06	30,0
	Latex	BONAGL112.					No virus			0,18	0,15	0,10	30,0
		KIM5681		C	K	≤ 1,5	●		< 1 500	0,22	0,20	0,15	30,5
Industriels	Nitrile	HOP1142		B	JKT	≤ 1,4	●	●		0,11	0,1		24,0
		HOP1144		B	JKT	≤ 1,5	●	●		0,11	0,1		29,0
		KIM6200		B	JKOPT	≤ 0,65	●	●		0,15	0,12	0,09	25,0
		KIM6210		B	JKOPT	≤ 0,65	●			0,19	0,14	0,11	30,0
		KIM6288		B	KPT	≤ 1,5	●	●		0,07	0,05	0,04	24,0
		KIM9062		B	JKT	≤ 0,65	●	●		0,16	0,14	0,11	24,0
		KIM9761		B	JKT	≤ 0,65	●	●		0,16	0,14	0,11	30,0
		KIM9921		C	K	≤ 0,65	●	●		0,09	0,08	0,06	24,0
		NACG570		B	GKL	≤ 0,65	●	●	< 1 600	0,12	0,09	0,06	24,0
		NACG570L		B	GKL	≤ 0,65	●	●		0,13	0,09	0,08	28,0
		NACG570B		A	ABGIKL	≤ 0,65	●	●		0,12	0,08	0,05	24,0
	Latex	NACG300		A	ABGIKL	≤ 0,65	●	●		0,15	0,12	0,08	24,5
	Vinyle	GENV800								0,10	0,08	0,06	30,0



CLEANROOM NITRILE

> CLEANVIEW® 12" BLANCS



EN ISO 374-1/2016/TYPE C



JK



VIRUS



- Manchettes roulées
- Ambidextres
- Doigts texturés
- Propriétés ESD
- Particules par $\text{cm}^2 \geq 0,5 \mu\text{m}$: 1120 (IEST-RP-CC005)
- $\text{AQL} \leq 1,5$ (EN 374-2)
- Certifiés EPI Cat. III selon le Règlement (UE) 2016/425

	Majeur	Paume	Poignet
Épaisseur (mm)	0,16	0,13	0,09

Référence	SGNITRIPUR
Tailles disponibles	XS à XL
Emballage	Double emballage par 100 unités
Conditionnement	1 000 unités par carton

> KIMTECH™ G3 12" BLANCS



EN ISO 374-1/2016/TYPE B



KPT



VIRUS



- Manchettes roulées
- Ambidextres
- Doigts texturés
- Conditionnés en ISO 5
- Haut niveau de propreté
- Particules par $\text{cm}^2 \geq 0,5 \mu\text{m}$: <950 (IEST-RP-CC005)
- $\text{AQL} \leq 1,5$ (EN 374-2)
- Certifiés EPI Cat. III selon le Règlement (UE) 2016/425

	Majeur	Paume	Poignet
Épaisseur (mm)	0,16	0,13	0,10

Référence	KIM5688
Tailles disponibles	XS à XL
Emballage	Double emballage par 100 unités
Conditionnement	1 000 unités par carton

CLEANROOM NITRILE

> KIMTECH™ G3 NXT™ 12" BLANCS



- Manchettes roulées
- Ambidextres
- Doigts texturés
- Conditionnés en ISO 3
- Haut niveau de propreté
- Particules par $\text{cm}^2 \geq 0,5 \mu\text{m}$: <950 (IEST-RP-CC005)
- AQL $\leq 1,5$ (EN 374-2)
- Certifiés EPI Cat. III selon le Règlement (UE) 2016/425

	Majeur	Paume	Poignet
Épaisseur (mm)	0,16	0,13	0,10

Référence	KIM6299
Tailles disponibles	XS à XL
Emballage	100 unités par sachet
Conditionnement	1 000 unités par carton

> CLEANVIEW® 12" BLANCS



- Manchettes roulées
- Ambidextres
- Doigts & paumes texturés
- Conditionnés en ISO 5
- Haut niveau de propreté
- Particules par $\text{cm}^2 \geq 0,5 \mu\text{m}$: < 1200 (IEST-RC-CC005)
- AQL $\leq 1,5$ (EN 374-2)
- Certifiés EPI Cat. III selon le Règlement (UE) 2016/426

	Majeur	Paume	Poignet
Épaisseur (mm)	0,13	0,10	0,06

Référence	BONAGL300
Tailles disponibles	S à XL
Emballage	Double emballage par 100 unités
Conditionnement	1 000 unités par carton

CLEANROOM LATEX

> CLEANVIEW® 12" BLANCS



- Manchettes roulées
- Ambidextres
- Paumes texturées
- Conditionnés en ISO 5

	Majeur	Paume	Poignet
Épaisseur (mm)	0,18	0,15	0,10

Référence	BONAGL112.
Tailles disponibles	S à XL
Emballage	Double emballage par 100 unités
Conditionnement	1 000 unités par carton

> KIMTECH™ G3 12" BEIGES



EN ISO 374-1/2016/TYPE C



- Manchettes roulées
- Ambidextres
- Doigts et paumes texturés
- Grande sensibilité tactile
- Particules par cm² ≥ 0,5 µm : <1500 (IEST-RP-CC005)
- AQL ≤ 1,5 (EN 374-2)
- Certifiés EPI Cat. III selon le Règlement (UE) 2016/425

	Majeur	Paume	Poignet
Épaisseur (mm)	0,22	0,20	0,15

Référence	KIM5681
Tailles disponibles	S à XL
Emballage	Double emballage par 100 unités
Conditionnement	1 000 unités par carton

INDUSTRIEL NITRILE

> COVERFEEL CARE 9" BLEUS



EN ISO 374-1/2016/TYPE B



JKT



VIRUS



- Manchettes roulées
- Ambidextres
- Doigts texturés
- Sans agents de vulcanisation pour limiter les allergies
- AQL $\leq 1,4$ (EN 374-2)
- Certifiés EPI Cat. III selon le Règlement (UE) 2016/425
- Certifiés DM Classe I selon le Règlement (UE) 2017/745

	Majeur	Paume	Poignet
Épaisseur (mm)	0,11	0,1	

Référence	HOP1142
Tailles disponibles	S à XXL
Emballage	100 unités par boîte distributrice (90 unités par boîte distributrice en XL et XXL)
Conditionnement	1000 unités par carton (900 unités par carton en XL et XXL)

> COVERFEEL CARE 11" BLEUS



EN ISO 374-1/2016/TYPE B



JKT



VIRUS



- Manchettes roulées
- Ambidextres
- Doigts texturés
- Sans agents de vulcanisation pour limiter les allergies
- AQL $\leq 1,5$ (EN 374-2)
- Certifiés EPI Cat. III selon le Règlement (UE) 2016/425
- Certifiés DM Classe I selon le Règlement (UE) 2017/745

	Majeur	Paume	Poignet
Épaisseur (mm)	0,11	0,1	

Référence	HOP1144
Tailles disponibles	S à XXL
Emballage	100 unités par boîte distributrice (90 unités par boîte distributrice en XL et XXL)
Conditionnement	1000 unités par carton (900 unités par carton en XL et XXL)

INDUSTRIEL NITRILE

> KIMTECH™ POLARIS™ 9" MAGENTA



EN ISO 374-1/2016/TYPE B



JKOPT



VIRUS


Ansell

- Manchettes roulées
- Ambidextres
- Doigts texturés
- Protection contre les produits chimiques agressifs
- AQL ≤ 0,65 (EN 374-2)
- Certifiés EPI Cat. III selon le Règlement (UE) 2016/425

	Majeur	Paume	Poignet
Épaisseur (mm)	0,15	0,12	0,09

Référence	KIM6200		
Tailles disponibles	XS à XL		
Emballage	100 unités par boîte distributrice (90 unités par boîte distributrice en XL)		
Conditionnement	1000 unités par carton (900 unités par carton en XL)		

> KIMTECH™ POLARIS™ XTRA 12" MAGENTA



EN ISO 374-1/2016/TYPE B



JKOPT



VIRUS


Ansell


- Manchettes roulées
- Ambidextres
- Doigts texturés
- Protection contre les produits chimiques agressifs
- AQL ≤ 0,65 (EN 374-2)
- Certifiés EPI Cat. III selon le Règlement (UE) 2016/426

	Majeur	Paume	Poignet
Épaisseur (mm)	0,19	0,14	0,11

Référence	KIM6210		
Tailles disponibles	XS à XL		
Emballage	50 unités par boîte distributrice		
Conditionnement	500 unités par carton		

INDUSTRIEL NITRILE

> KIMTECH™ OPAL™ 10" VIOLETS

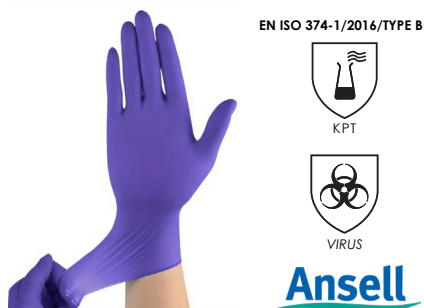

- Manchettes roulées
- Ambidextres
- Doigts texturés
- Grande sensibilité tactile
- AQL ≤ 1,5 (EN 374-2)
- Certifiés EPI Cat. III selon le Règlement (UE) 2016/425

	Majeur	Paume	Poignet
Épaisseur (mm)	0,07	0,05	0,04

Référence	KIM6288
Tailles disponibles	XS à XL
Emballage	200 unités par boîte distributrice (170 unités par boîte distributrice en XL)
Conditionnement	2000 unités par carton (1700 unités par carton en XL)

> KIMTECH™ PURPLE NITRILE™ 10" VIOLETS



- Manchettes roulées
- Ambidextres
- Doigts texturés
- Propriétés antistatiques
- AQL ≤ 1,5 (EN 374-2)
- Certifiés EPI Cat. III selon le Règlement (UE) 2016/425

	Majeur	Paume	Poignet
Épaisseur (mm)	0,16	0,14	0,11

Référence	KIM9062
Tailles disponibles	XS à XL
Emballage	100 unités par boîte distributrice (90 unités par boîte distributrice en XL)
Conditionnement	1000 unités par carton (900 unités par carton en XL)

INDUSTRIEL NITRILE

> KIMTECH™ PURPLE NITRILE™ XTRA™ 12" VIOLETS



EN ISO 374-1/2016/TYPE B



JKT



VIRUS



- Manchettes roulées
- Ambidextres
- Doigts texturés
- Propriétés antistatiques
- AQL ≤ 1,5 (EN 374-2)
- Certifiés EPI Cat. III selon le Règlement (UE) 2016/425

	Majeur	Paume	Poignet
Épaisseur (mm)	0,16	0,14	0,11

Référence	KIM9761
Tailles disponibles	XS à XL
Emballage	50 unités par boîte distributrice
Conditionnement	500 unités par carton

> KIMTECH™ STERLING™ 10" GRIS



EN ISO 374-1/2016/TYPE C



K



VIRUS



- Manchettes roulées
- Ambidextres
- Doigts texturés
- Propriétés antistatiques et grande dextérité
- AQL ≤ 1,5 (EN 374-2)
- Certifiés EPI Cat. III selon le Règlement (UE) 2016/425

	Majeur	Paume	Poignet
Épaisseur (mm)	0,09	0,08	0,06

Référence	KIM9921
Tailles disponibles	XS à XL
Emballage	150 unités par boîte distributrice (140 unités par boîte distributrice en XL)
Conditionnement	1 500 unités par carton (1 400 unités par carton en XL)

INDUSTRIEL NITRILE

> NITRYL DERM 10" BLEUS



EN ISO 374-1/2016/TYPE B



GKL



VIRUS



- Manchettes roulées
- Ambidextres
- Surface extérieure texturée
- Chlorinés pour gantage / dégantage facile
- Particules par $\text{cm}^2 \geq 0,5 \mu\text{m}$: < 1600 (IEST-RP-CC005)
- $\text{AQL} \leq 0,65$ (EN 374-2)
- Certifiés EPI Cat. III selon le Règlement (UE) 2016/425
- Certifiés DM Classe I selon le Règlement (UE) 2017/745

	Majeur	Paume	Poignet
Épaisseur (mm)	0,12	0,09	0,06

Référence	NACG570
Tailles disponibles	XS à XL
Emballage	100 unités par boîte distributrice
Conditionnement	1 000 unités par carton

> NITRYL DERM LONG 12" BLEUS



EN ISO 374-1/2016/TYPE B



GKL



VIRUS



- Manchettes roulées et longues
- Ambidextres
- Surface extérieure texturée
- Chlorinés pour gantage / dégantage facile
- $\text{AQL} \leq 0,65$ (EN 374-2)
- Certifiés EPI Cat. III selon le Règlement (UE) 2016/425
- Certifiés DM Classe I selon le Règlement (UE) 2017/745

	Majeur	Paume	Poignet
Épaisseur (mm)	0,13	0,09	0,08

Référence	NACG570L
Tailles disponibles	XS à XL
Emballage	100 unités par boîte distributrice
Conditionnement	1 000 unités par carton

INDUSTRIEL NITRILE

> NITRYL DERM BLACK 10" NOIRS



EN ISO 374-1/2016/TYPE A



ABGIKL



VIRUS



- Manchettes roulées
- Ambidextres
- Surface extérieure texturée
- Chlorinés pour gantage / dégantage facile
- AQL $\leq 0,65$ (EN 374-2)
- Certifiés EPI Cat. III selon le Règlement (UE) 2016/425
- Certifiés DM Classe I selon le Règlement (UE) 2017/745

	Majeur	Paume	Poignet
Épaisseur (mm)	0,12	0,08	0,05

Référence	NACG570B
Tailles disponibles	XS à XL
Emballage	100 unités par boîte distributrice
Conditionnement	1 000 unités par carton

INDUSTRIEL LATEX

> SALUS 10" BLANCS



EN ISO 374-1/2016/TYPE A



ABGIKL



VIRUS



- Manchettes roulées
- Ambidextres
- Surface extérieure texturée
- Polymère synthétique interne pour gantage / dégantage facile
- AQL $\leq 0,65$ (EN 374-2)
- Certifiés EPI Cat. III selon le Règlement (UE) 2016/425
- Certifiés DM Classe I selon le Règlement (UE) 2017/745

	Majeur	Paume	Poignet
Épaisseur (mm)	0,15	0,12	0,08

Référence	NACG300
Tailles disponibles	XS à XL
Emballage	100 unités par boîte distributrice
Conditionnement	1 000 unités par carton



INDUSTRIEL VINYLE

> CLEANVIEW® 12" TRANSPARENTS



- Manchettes roulées
- Ambidextres
- Surfaces extérieures lisses
- Confort pour l'opérateur

	Majeur	Paume	Poignet
Épaisseur (mm)	0,10	0,08	0,06

Référence	GENV800
Tailles disponibles	S à XL
Emballage	Double emballage par 100 unités
Conditionnement	1 000 unités par carton



GANTS DE TRAVAIL



NORMES & PRODUITS

Type de produits	Matériaux	Produits	Thermo-résistant	Surfaces sensibles	Dimension (cm)	Taille	Emballage
Gants de travail	Lycra	GANLY5110BA1H		●	29,0	Homme	10 paires par sachet
		GANLY5110BD1F		●	26,5	Femme	10 paires par sachet
	Coton	GANCO9001-BD1.		●	29,0	6 à 10	10 paires par sachet
	Silicone	MAS8200	●		30,0	Taille Unique	Individuel

LYCRA

> GANT-MAILLE 12" BLANCS



- Poignet avec un ourlet
- Ambidextres
- Contre les traces de doigts sur les surfaces sensibles
- Excellent confort

Référence	GANLY5110BA1H
Dimension (cm)	29
Taille	Homme
Emballage	20 unités par sachet
Conditionnement	Par sachet

> GANT-MAILLE 11" BLANCS



- Poignet avec un ourlet de couleur
- Ambidextres
- Contre les traces de doigts sur les surfaces sensibles
- Excellent confort

Référence	GANLY5110BD1F
Dimension (cm)	26,5
Taille	Femme
Emballage	10 unités par sachet
Conditionnement	Par sachet

COTON

> GANT-MAILLE 12" BLANCS



- Poignet avec un ourlet de couleur
- Ambidextres
- Contre les traces de doigts sur les surfaces sensibles
- Peu pelucheux, avec une dextérité et un confort optimal

Référence	GANCO9001-BD1.
Dimension (cm)	29
Tailles disponibles	6 à 10
Emballage	10 unités par sachet
Conditionnement	Par sachet



SILICONE

> MASTRAD® 12" NOIRES



- Moufle thermorésistante (jusqu'à 350°C)
- Ambidextre
- Stérilisable, lavable et autoclavable (jusqu'à 20 cycles)
- Rainures antidérapantes pour optimiser la prise en main
- Certifiée EPI Cat. II selon le Règlement (UE) 2016/425

Référence	MAS8200
Dimension (cm)	30
Taille	Taille Unique
Emballage	Individuel
Conditionnement	À l'unité



DOIGTIERS




NORMES & PRODUITS

Type de produits	Matériaux	Produits	Effets	Test HBM		Résistance à la traction (kg/m²)	Elongation (%)	Diamètre par taille (mm)				Epaisseur (µm)	Longueur (mm)
				Classe	Valeurs			S	M	L	XL		
Doigtiers	Latex	CALFB01	Antistatiques	Classe I	< 1000 V	3170	761	15	16,5	18	21	125	64,7 - 74,9
		CALFW04	Antistatiques	Classe II	≥ 1000 V	3170	761	16	18	20	22	125	64,7 - 74,9
		CALFY01				3170	761	16	18	20	22	125	64,7 - 74,9

LATEX

> ANTISTATIQUES NOIRS

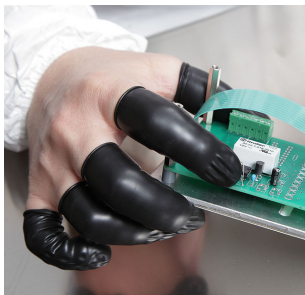

- Lavés et conditionnés en salle propre ISO 5
- Excellente sensibilité tactile
- Effets antistatiques
- À utiliser avec les appareils électroniques sensibles à l'électricité statique CLASS I / CATEGORY A (<1000V).
- Résistivité de surface moyenne : $2 \times 10^6 \Omega/\text{m}^2$

	S	M	L	XL
Diamètre par taille (mm)	15	16,5	18	21
Épaisseur (mm)	0.125			

Référence	CALFB01
Longeurs disponibles (mm)	64,7 - 74,9
Emballage	144 unités sous double emballage
Conditionnement	720 unités par carton

> ANTISTATIQUES ROSES



- Lavés et conditionnés en salle propre ISO 5
- Excellente sensibilité tactile
- Effets antistatiques
- À utiliser avec les appareils sensibles à l'électricité statique CLASSE II / CATÉGORIE B avec une sensibilité seuil $\geq 1000V$
- Résistivité de surface moyenne : $10^{12} \Omega/\text{m}^2$

	S	M	L	XL
Diamètre par taille (mm)	16	18	20	22
Épaisseur (mm)	0.125			

Référence	CALFW04
Longeurs disponibles (mm)	64,7 - 74,9
Emballage	144 unités sous double emballage
Conditionnement	720 unités par carton

LATEX

> STANDARDS BEIGES



- Lavés et conditionnés en salle propre ISO 5
- Excellente sensibilité tactile

	S	M	L	XL
Diamètre par taille (mm)	16	18	20	22
Épaisseur (mm)	0.125			

Référence	CALFY01
Longeurs disponibles (mm)	64,7 - 74,9
Emballage	144 unités sous double emballage
Conditionnement	1 440 unités par carton



ANNEXES



LES NORMES

EN 16523-1 : Détermination de la résistance des matériaux à la perméation par les produits chimiques

Partie 1 : Perméation par des produits chimiques liquides potentiellement dangereux dans des conditions de contact continu.

NF EN 374-3 : Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes

Partie 3 : détermination de la résistance à la perméation des produits chimiques.

NF EN ISO 374-4 : Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes

Partie 4 : détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques.

ISO 16604:2004 : Vêtements de protection contre les contacts avec le sang et les fluides corporels

Détermination de la résistance à la pénétration par des pathogènes véhiculés par le sang des matériaux entrant dans la fabrication des vêtements de protection.

EN 420:2003+A1 : Gants de protection

Exigences générales et méthodes d'essai. Cette norme définit :

- Le marquage
 - o Le nom du fabricant
 - o La désignation du gant
 - o La taille du gant (6 à 11)
 - o La marque CE garantissant une conception européenne
 - o Les pictogrammes associés aux normes auxquelles obéit le gant en question.
- L'inocuité
 - o La teneur en chrome (VI) qui doit être indétectable (pas plus de 3mg/kg).
 - o La neutralité du pH des gants, entre 3,5 et 9,5.
 - o Le pourcentage de protéines extractable des gants en caoutchouc naturel doit être testé selon les spécifications de la norme EN455-3.
- La dextérité

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5
Longueur de l'épingle	11 mm	9.5 mm	8 mm	6.5 mm	5 mm

Le niveau 5 étant la meilleure dextérité possible.

- La perméabilité : Les gants de protection doivent être testés pour évaluer leur résistance à la perméation. Ainsi, pour les gants spécifiques, la transmission de vapeur d'eau est fixée à 5 mg/cm²/h pour 8 heures contre 8 mg/cm²/h pour des gants de sécurité plus conventionnels.

- La taille

TAILLES	TOUR DE PAUME	LONGUEUR DE LA MAIN	LONGUEUR MINIMALE DU GANT
TAILLE 6	152 mm	160 mm	220 mm
TAILLE 7	178 mm	171 mm	230 mm
TAILLE 8	203 mm	182 mm	240 mm
TAILLE 9	229 mm	192 mm	250 mm
TAILLE 10	254 mm	204 mm	260 mm
TAILLE 11	279 mm	215 mm	270 mm

- Le confort : Le confort des gants de sécurité ne doit en aucun cas primer sur la résistance de ceux-ci. Aussi, s'agissant des gants comportant des coutures, leur solidité ne doit pas compromettre les performances globales offertes par le gant. Le gant doit dans la mesure du possible être confortable sans altérer encore une fois les performances du gant.

VOUS SOUHAITEZ NOUS CONTACTER ?

Notre équipe se tient à votre disposition du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi de 9h à 17h.



+33 (0)1 34 44 23 14



geniclean@sterigene.com



VOUS SOUHAITEZ UN DEVIS OU UN RÉASSORT ?

Retrouvez tous nos consommables & nos équipements de la personne et faites vos demandes de devis en 2 clics sur notre boutique en ligne :

www.STERIGENE-STORE.com

Retrouvez l'ensemble de nos produits et de nos services sur www.STERIGENE.com

