




HOUSSE TYVEK ÉLASTIQUÉE – BASE CYLINDRIQUE

AUTOCLAVABLE
 CAPHC-d-h

DESCRIPTION

Les Housses CAPEO en Tyvek 1422 sont destinées à couvrir les cuves ou autres conteneurs de gros volume, utilisés dans la production industrielle pharmaceutique. Ces dispositifs d'obturation avec élastique (sans latex) empêchent les particules et autres poussières de s'infiltrer. Et elles sont surtout une solution rapide et pratique pour l'emballage avant stérilisation à l'autoclave. Elles offrent une parfaite pénétration de la vapeur et sèchent pendant la stérilisation.

- ✓ Epousent toutes les ouvertures dans la limite des contraintes dimensionnelles
- ✓ Autoclavables
- ✓ Parfaitement hermétiques grâce à leur diamètre élastiqué (sans latex)
- ✓ Bonne résistance aux déchirements et aux perforations.
- ✓ Excellente barrière microbienne.

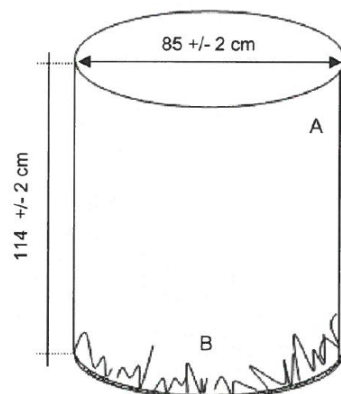

PÉREMPTION & CONDITIONS DE STOCKAGE

- ✓ Stocker à des températures comprises entre 10°C et 25°C
- ✓ Stocker dans un endroit sec
- ✓ Protéger des sources de chaleur ou radioactives
- ✓ Vérifier l'intégrité de l'emballage sous vide avant utilisation



CONDITIONNEMENT

Références	Dimensions (cm)	Conditionnement
CAPHC-85-114	114 (h) x 85 (d)	Carton de 10 pièces emballées individuellement

NOUS CONTACTER avec vos quantités, pour développement produits sur mesure.

CLEANVIEW, la marque propre de  **STERIGENE**

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1) 34 44 23 23
Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42
Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com

Une société du groupe
 **SYNEXIN**



HOUSSE TYVEK ÉLASTIQUÉE – BASE CYLINDRIQUE

AUTOCLAVABLE
 CAPHC-d-h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Property		Norm/Method	U.M.	Value	
				value	class
Weight		ISO 4591	gr/m ²	41	n.a.
Abrasion resistance		EN 530/96	cycles	>100 <500	2
Flex cracking resistance		EN-ISO 7854/99 (B)	cycles	> 100.000	6
Trapezoidal tear resistance	MD	EN-ISO 9073-4/99	N	16,6	1
	XD	EN-ISO 9073-4/99	N	24,4	2
Traction resistance	MD	EN-ISO 13934-1/00	N	ND	ND
	XD	EN-ISO 13934-1/00	N	ND	ND
Puncture resistance		EN 863/95	N	12,9	2
Burst resistance		EN-ISO 13938-2/01	KPa	88.90	2
Stability of heat	ext/ext	ISO 5978/90	-	No adhesion	
	ext/int.	ISO 5978/90	-		
	int./int.	ISO 5978/90	-		
Surface resistivity		EN 1149-1/97	Ω	9,3 . 10 ⁹	
Hydrostatic head		EN ISO 20811/93	cm H ₂ O	120	
			Pa	ND	
Air permeability	Mean	ISO 9237/97	mm/s	0,82±0,16	
	coeff. of variation		%	28,4	
MVTR			gr/m ² /24h	1400	
Ignition resistance		prEN 13274-4/98 (3)	-	ND	
Shrink Temperature			°C	132	
Melt Temperature			°C	135	
Steam Pressure			bar	1,03-1,24 (standard autoclave cycle parameters)	

DONNÉES PARTICULAIRES DU TYVEK

Particle release (Helmke Drum Test – IFTH Lyon)

Differential particle release

Raw Material	Micron dimension (µm)							
	0,3	0,5	0,7	1	3	5	7	10
TYVEK	11775	10580	9665	9662	282	30	11	3

Cumulated particle release

Raw Material	Micron dimension (µm)		
	0,3	0,5	5
TYVEK	42008	30233	44

Particle penetration (% Filtration - IOM Edinburgh)

Raw Material	Micron dimension (µm)					
	0,35 – 0,5	0,5 – 0,6	0,6 – 1,5	1,5 – 2,0	2,0 – 2,5	> 2,5
TYVEK	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%

Les données affichées sont des valeurs typiques mesurées au moment de la publication. Ce ne sont pas des spécifications et ne doivent pas être utilisées en tant que telles. Une comparaison de ces données sera valide uniquement si les résultats sont obtenus via des tests réalisés dans la même installation d'essai et dans des conditions similaires.

CLEANVIEW, la marque propre de  **STERIGENE**

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1) 34 44 23 23
Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42
Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com

Une société du groupe

 **SYNEXIN**